




FICHE PRATIQUE

« Les modules de la plateforme Therap-e (en-visioconférence) »

Contact et assistance : support@normand-esante.fr
02 50 53 70 01

Date de dernière mise à jour : 24/01/2019

Nb de pages : 6

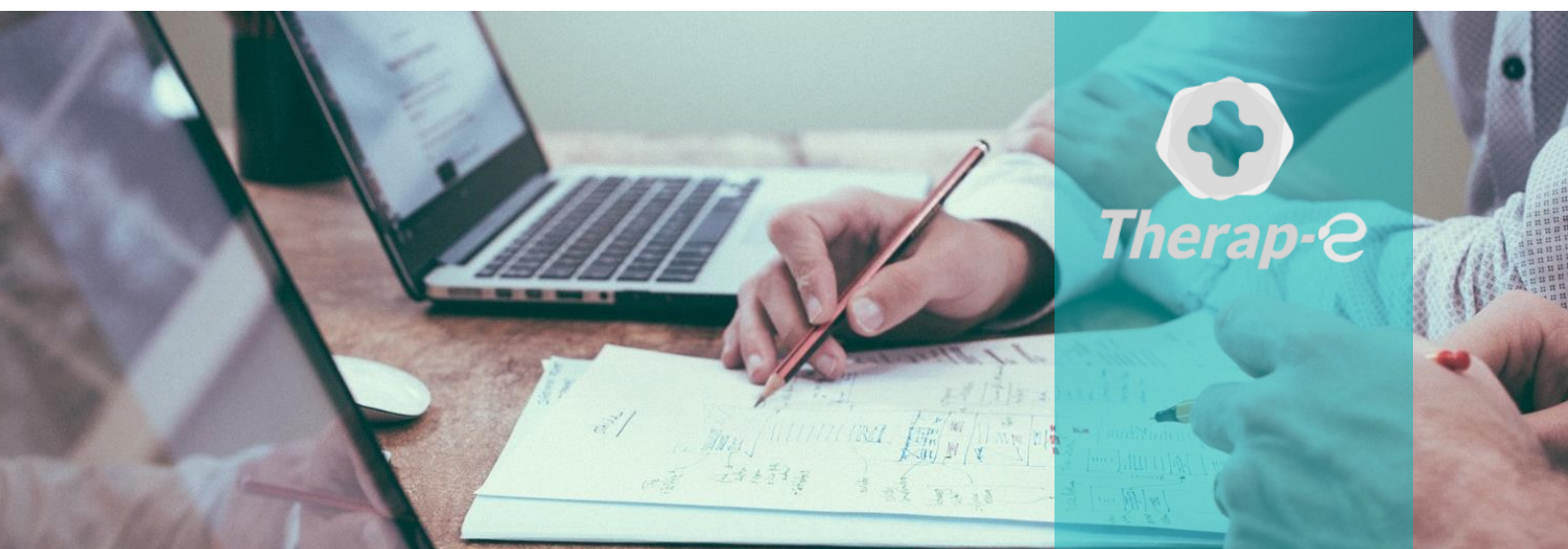

SITE DE CAEN

Siège social
10 rue des compagnons
14000 Caen
02 50 53 70 00

SITE DE ROUEN

1231 rue de la Sente aux Bœufs
76160 Saint Martin du Vivier
02 32 80 91 50

contact@normand-esante.fr


1 Les différents modules de Therap-e


EN-VISIOCONFERENCE

1.1 Entrer en visioconférence

Pour entrer dans une salle de visioconférence depuis la page d'accueil :


- Cliquer sur l'onglet « Salles »  SALLES dans le bandeau du haut

NB : Certaines salles sont dédiées à la mobilité, elles sont caractérisées par un icône téléphone et sont nommées « mobilité » : 

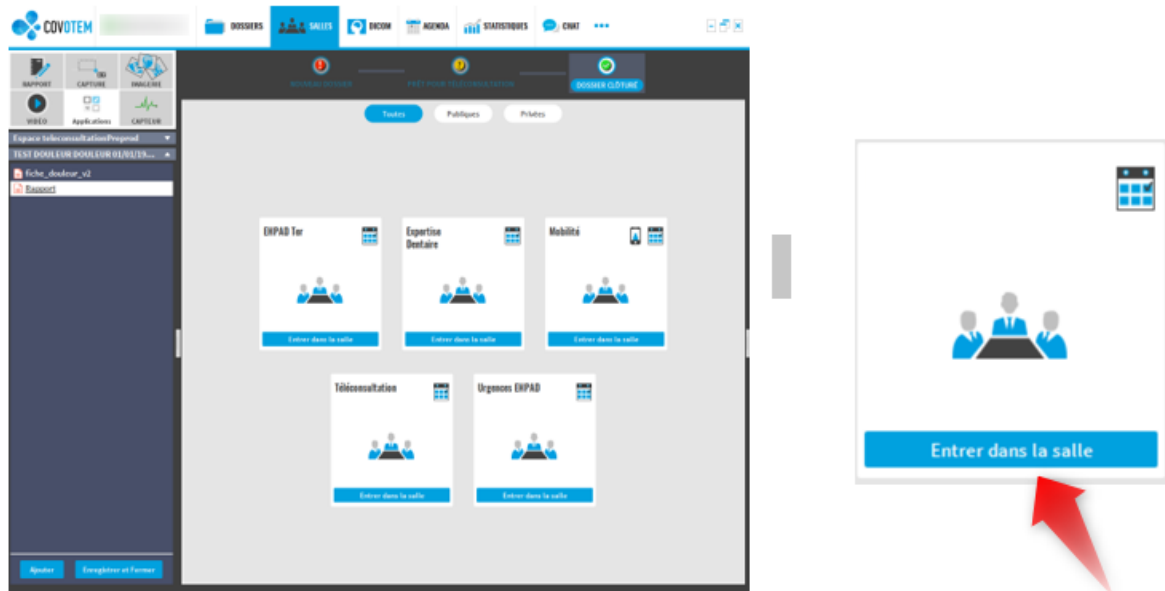



Choisir la salle de téléconsultation et cliquer sur le bouton « Entrer dans la salle »

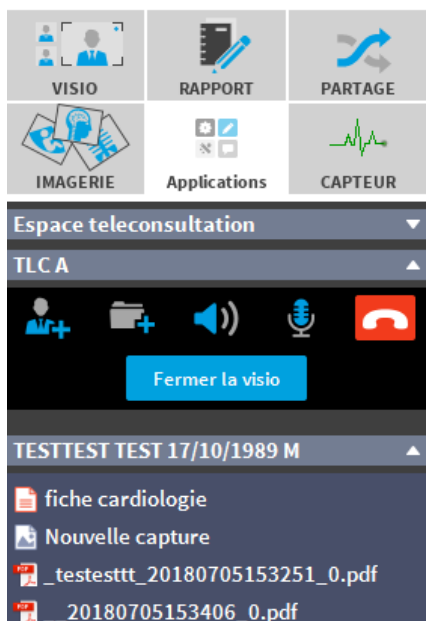1.2 Visualisation des éléments et la palette de modules de la plateforme



Lorsque le professionnel de santé requérant ou requis ouvre un dossier, celui-ci est instantanément disponible pour l'autre participant à la visioconférence.

Pour ouvrir un élément, il suffit de double-cliquer dessus, ou de lancer le module correspondant.


Les Boutons   servent à activer/désactiver les haut-parleurs (bouton de gauche) et/ou le microphone (bouton de droite)


1.2.1 Le module « Visioconférence »


Pour afficher le module « Visio », appuyer sur l'icône  de la palette des modules. Le module s'ouvre et affiche les flux vidéo.

Pour fermer le module « Visio », cliquer sur le bouton 

Pour chaque flux, un menu est disponible et présente différentes options selon la configuration vidéo. Cliquer sur le bouton  pour obtenir les options suivantes :

 Arrêter le flux
Arrête ou démarre le flux vidéo.

 Ouvrir en visio
Affiche le flux en mode visioconférence : le flux sera affiché en grand format, les autres vignettes seront affichées sur la barre du bas.

 Externaliser
Vous pouvez choisir une vidéo et l'extraire sur votre écran secondaire, de manière à avoir le mode visio dans la fenêtre de Covotem™ sur votre écran principal, et la vidéo choisie en plein écran sur votre écran secondaire.

Lancer l'affichage en mode visioconférence. Les contrôles seront différents sur une webcam ou une caméra IP.



HD 720P
Très élevée
Élevée
Moyenne
Faible

Qualité

Le bouton Qualité permet d'avoir accès aux différentes qualités disponibles pour la caméra.

Positions

L'utilisateur peut changer la position de la caméra. Il peut retrouver les positions enregistrées en déroulant menu déroulant et en cliquant sur le nom de la position. Il est possible d'en supprimer ou d'en ajouter.

Zoom



Le zoom de la caméra peut être contrôlé de plusieurs façons :

- Cliquer glisser votre souris de manière à dessiner un carré : la caméra effectue un zoom sur la zone sélectionnée.
- Sélectionner un zoom prédéfini dans la liste ci-dessus, la caméra effectue un zoom ou un zoom arrière au pourcentage sélectionné.
- Utiliser les boutons + et -, la caméra effectue un zoom ou un zoom arrière léger.
- Faire tourner la molette de la souris vers l'avant pour effectuer un zoom avant, vers l'arrière pour effectuer un zoom arrière.



Les boutons d'orientation de la caméra permettent de modifier l'orientation de la caméra, ou directement depuis la vidéo en cliquant sur le point à centrer, ou encore en maintenant le clic droit et en déplaçant la souris.



Le bouton Photo vous permet de prendre une photo. Choisissez de l'Enregistrer sur l'ordinateur ou bien l'Ajouter au dossier, si un dossier patient est ouvert.



0:00 / 1:00

Le bouton Vidéo vous permet de prendre une vidéo. Choisir de l'Enregistrer sur l'ordinateur ou bien l'Ajouter au dossier, si un dossier patient est ouvert.

1.2.2 Le module « Editeur de rapport »

Le module Editeur de rapport permet de rédiger un compte rendu de manière collaborative. Il est accessible depuis la palette des modules à condition qu'un dossier soit ouvert.


Pour lancer l'éditeur de rapport, cliquer sur l'icône Rapport :



- Si aucun rapport n'est présent dans le dossier, la fenêtre de dialogue permet d'en créer un nouveau
- Sinon, le premier rapport présent dans la liste du dossier est ouvert automatiquement
- Lorsqu'un rapport est déjà ouvert, cliquer sur l'icône « Rapport » pour le ramener au premier plan

1.2.3 Le module « Partage »

Il est possible de partager son écran ou de demander un partage d'écran à un autre professionnel en cliquant sur le module partage

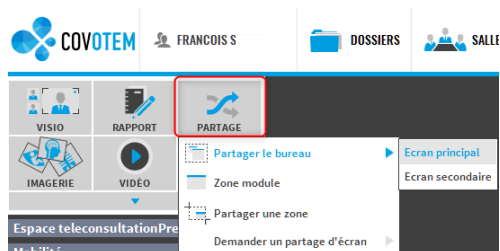


On peut choisir de partager son écran principal ou secondaire ou même une zone précise.

Il est possible d'interagir à tout moment avec l'écran partagé d'un autre utilisateur si la fonctionnalité « Interactions » est activé



À la fin de la visualisation, fermer le partage d'écran en cliquant sur la croix rouge en bas à gauche de l'écran

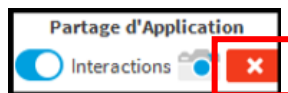

1.2.4 Le module « Imagerie »

Le module imagerie




permet de visualiser les images contenues dans un télé dossier.

Double-cliquer sur l'examen pour que les séries qu'il contient apparaissent dans le télé dossier.

- Explorer : permet d'afficher dans l'arborescence les images contenues dans la série
- Envoyer vers : permet d'envoyer les images sur la modalité DICOM à laquelle votre ordinateur est relié
- Supprimer : permet de supprimer l'image du dossier
- Exporter : permet de l'enregistrer sous votre ordinateur ou sous un périphérique de stockage accessible depuis votre ordinateur

1.2.5 Le module « Applications tierces »

Pour ouvrir une application tierce durant une réunion ou durant l'édition d'un télé dossier, cliquer sur le bouton « Applications » :

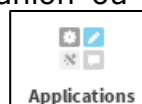

Un menu déroulant apparaît, proposant les applications tierces configurées précédemment dans les paramètres.


- Cliquer sur l'application souhaitée. Si une seule application tierce est configurée, le bouton porte l'intitulé de l'application tierce et lance l'application directement suite au clic
- Si le dossier ne contient pas de fichiers, l'application se lance simplement


1.2.6 Le module « Capteur »

Le module capteur permet de mesurer plusieurs composantes avec le boîtier multiparamétrique :



Ce dispositif médical permet de monitorer plusieurs paramètres : l'ECG, la saturation en oxygène et la pression artérielle de façon non-invasive.

Le bouton  permet de démarrer et stopper l'enregistrement.

Le bouton  permet d'ajouter les enregistrements au télé dossier.