




FICHE PRATIQUE

Configuration audio / vidéo (Niveau 1)

Contact et assistance : support@normand-esante.fr
02 50 53 70 01

Date de dernière mise à jour : 24/01/2019
Nb de pages : 6

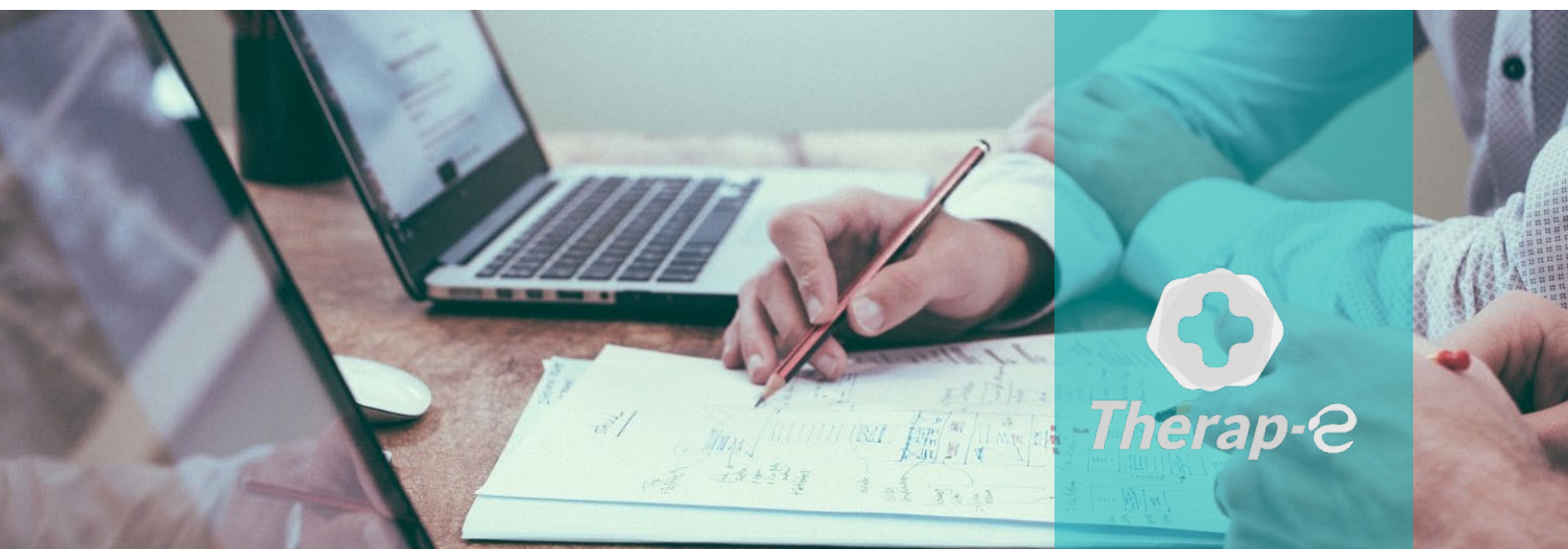

SITE DE CAEN

Siège social
Bâtiment COMETE
7 longue vue des astronomes
14111 Louvigny
02 50 53 70 00

SITE DE ROUEN

1231 rue de la Sente aux Bœufs
76160 Saint Martin du Vivier
02 32 80 91 50

contact@normand-esante.fr


1 Paramétrage de la partie « audio »

1.1 Ouvrir le menu paramétrage

Dans la barre de menu de l'application, choisir l'onglet « Paramètres ».




Le menu de réglage audio se trouve dans la colonne de gauche.

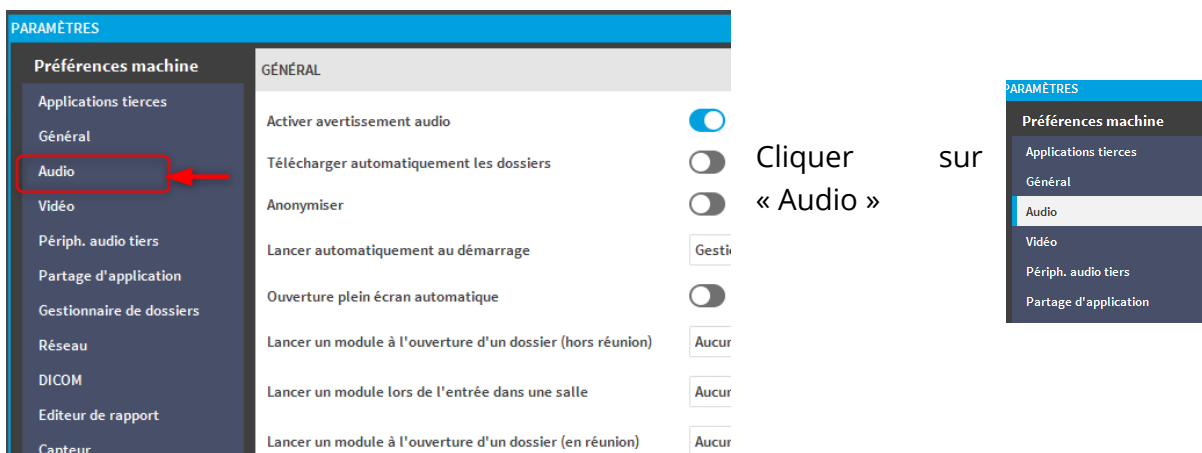


La fenêtre de paramétrage audio s'ouvre.

1.2 Choix du microphone

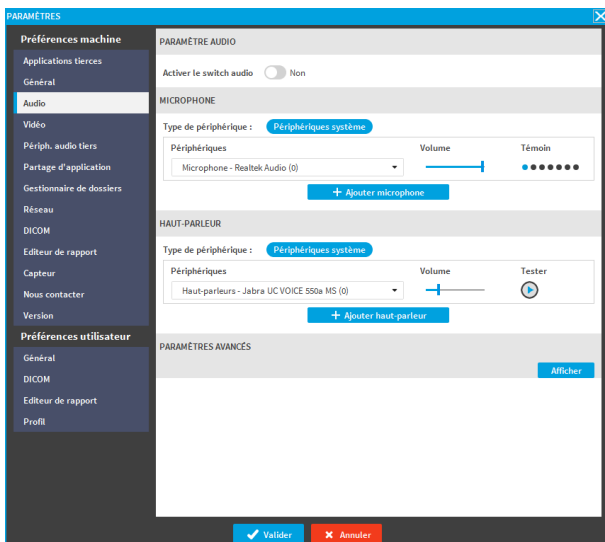

Dans la fenêtre de paramétrage audio cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner votre appareil.


Une fois l'appareil sélectionné, régler son volume en réglant le curseur « volume ».

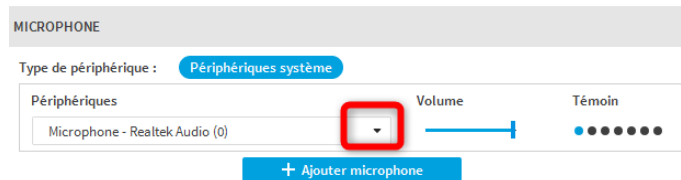

Si le poste dispose de plusieurs microphones, cliquer sur « ajouter un microphone » et répéter l'opération pour chaque nouvel appareil.

1.3 Choix du haut-parleur

Dans la fenêtre de paramétrage audio cliquer sur le menu déroulant pour sélectionner votre appareil.

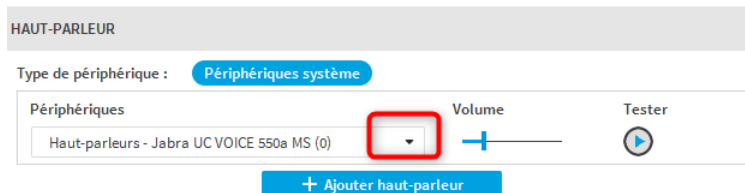


Une fois l'appareil sélectionné, régler son volume en réglant le curseur « volume ».

Si le poste dispose de plusieurs hauts-parleurs, cliquer sur « ajouter un microphone » et répéter l'opération pour chaque nouvel appareil.

Pour valider vos réglages cliquer sur « afficher » dans l'encart de paramètres avancés.



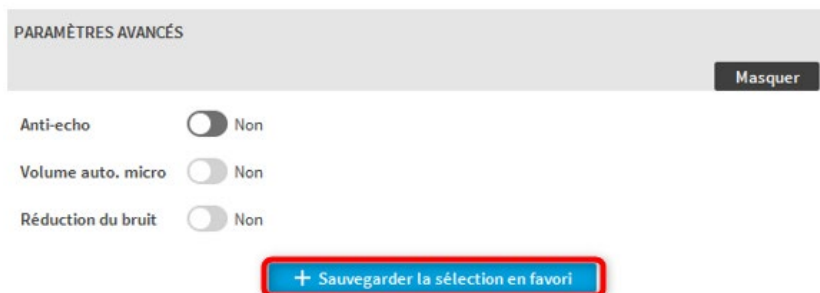


Cliquer sur « sauvegarder la sélection » en favori pour sauvegarder les réglages puis cliquer sur « valider ».


2 Paramétrage de la partie « vidéo »

2.1 Ouvrir le menu « paramètres »

Dans la barre de menu de l'application, choisir l'onglet « Paramètres ».

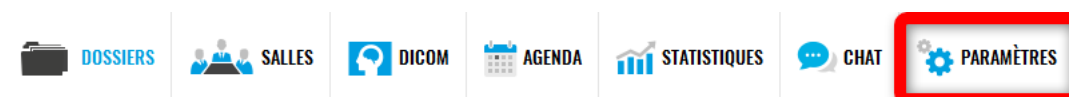


Le menu de réglage vidéo se trouve dans la colonne de gauche.

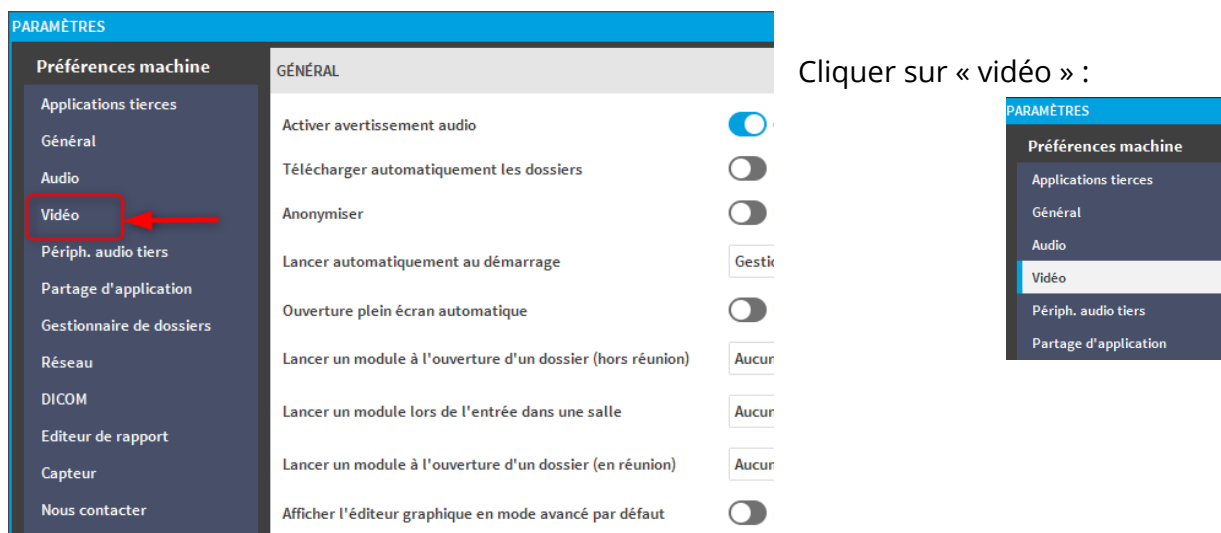

La fenêtre de paramétrage s'ouvre.

2.2 Réglage des flux vidéo

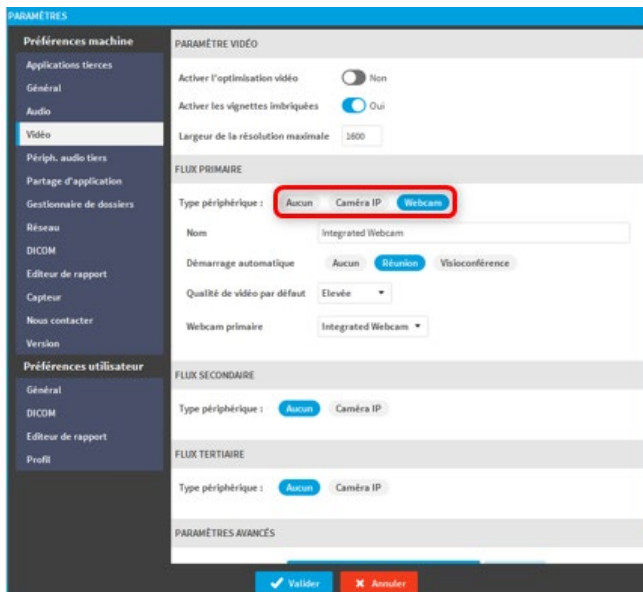


L'encart « flux primaire » permet de choisir l'appareil préférentiellement utilisé pour les flux vidéos.

Sélectionner l'appareil correspondant au flux vidéo souhaité : Caméra IP pilotable, ou webcam en cliquant sur le bouton correspondant.

L'encart « flux secondaire » permet de choisir un second appareil utilisé pour les flux vidéos.


Cliquer sur « sauvegarder la sélection » sous l'encart « paramètres avancés en favori » pour sauvegarder les réglages puis cliquer sur « valider ».

2.3 Lancement de la visioconférence de façon automatique

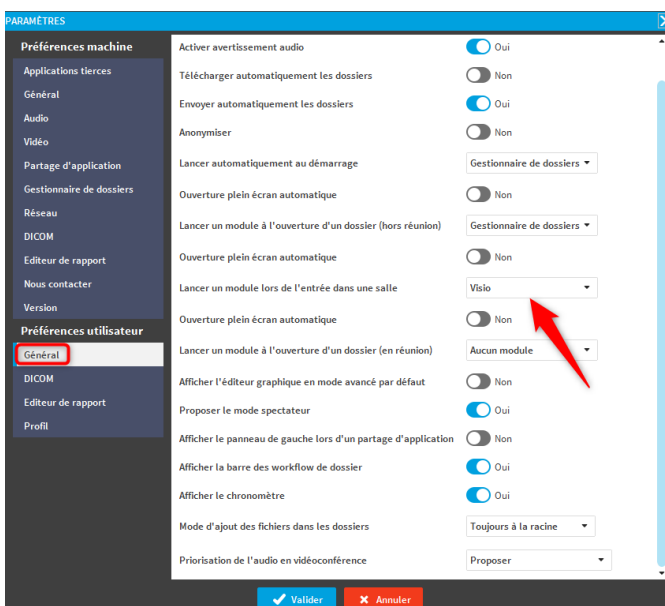

Pour que le flux vidéo démarre directement en visioconférence : dans la fenêtre « paramètres » cliquer sur « général » dans la colonne de gauche, sous l'encart « préférences utilisateur ».

Choisir « Visio » pour le menu « lancer un module lors de l'entrée dans une salle ».

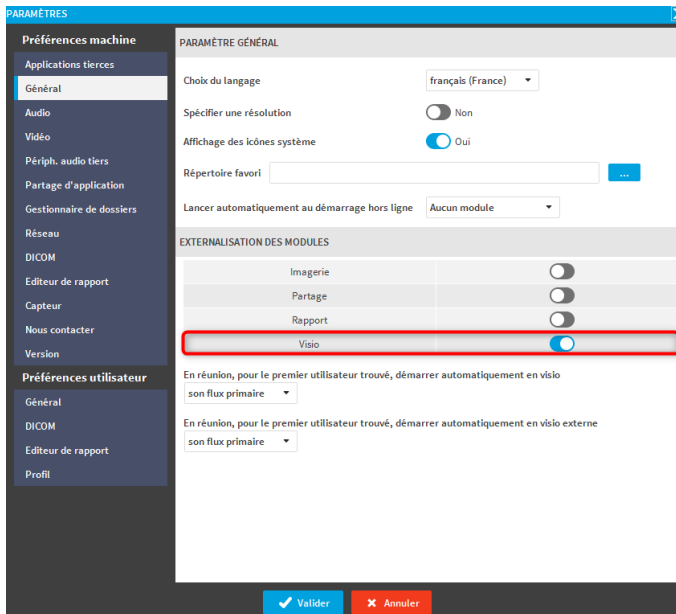

Pour que le flux vidéo démarre directement en visioconférence sur votre écran secondaire le cas échéant.

Dans la fenêtre « paramètres » cliquer sur « général » dans la colonne de gauche, sous l'encart « préférences machine ».

Activer le bouton radio : « Visio »

Cliquer sur 