




PLATEFORME DE TELEMEDECINE THERAP-E « Guide d'utilisation du Dispositif TELE- EEG »

SITE REQUERANT

Contact et assistance :	support@normand-esante.fr 02 50 53 70 01
Date de dernière mise à jour :	20/11/2019
Rédacteur :	François SEGUIN
Nb de Pages :	7



Télé-Expert
Un service *Therap-e*

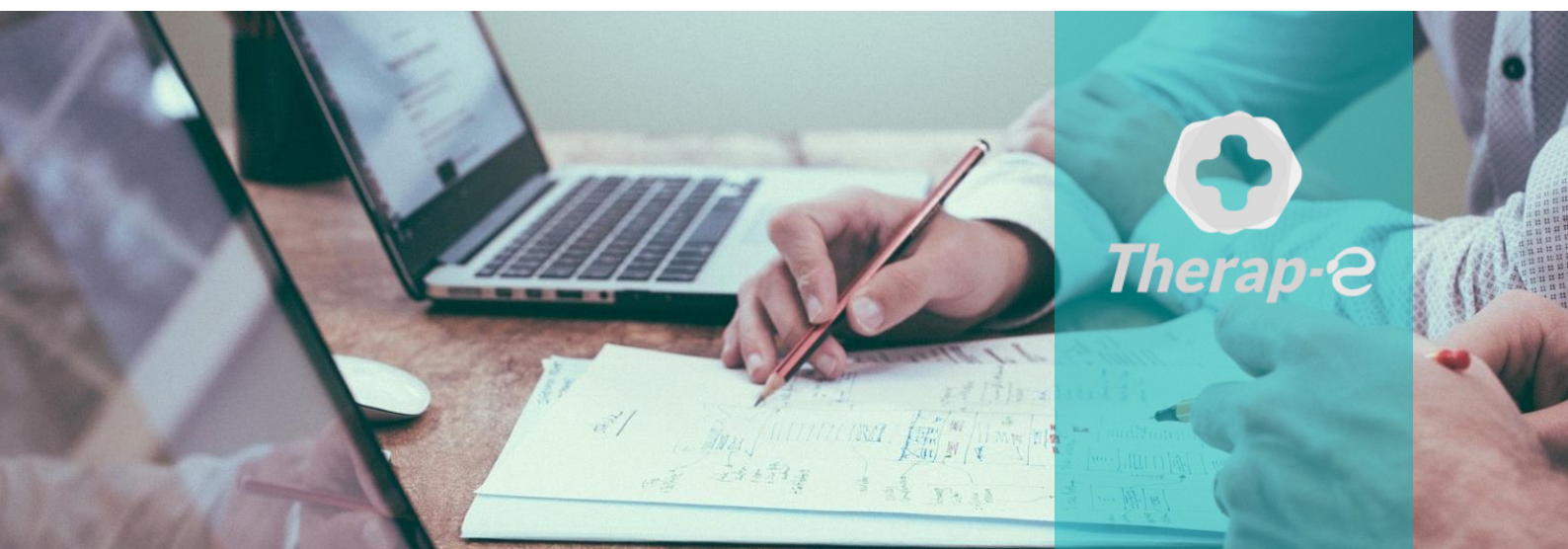

SITE DE CAEN

Siège social
Bâtiment COMETE
7 longue vue des astronomes
14111 Louvigny
02 50 53 70 00

SITE DE ROUEN

1231 rue de la Sente aux Bœufs
76160 Saint Martin du Vivier
02 32 80 91 50

Sommaire

1	CONNEXION A LA PLATEFORME DE TELEMEDECINE	3
1.1	AUTHENTIFICATION PAR CARTE DE PROFESSIONNEL	3
1.2	AUTHENTIFICATION PAR LOGIN/MOT DE PASSE	3
2	CREATION ET ALIMENTATION D'UN TELEDossier	3
2.1	MENU PRINCIPAL DE LA PLATEFORME DE TELEMEDECINE THERAP-E	3
2.2	CREATION D'UN TELEDossier	4
2.3	ALIMENTATION DU TELEDossier	5
2.3.1	<i>Ajout du tracé d'EEG au dossier</i>	5
2.3.2	<i>Fin de la saisie</i>	6
2.3.3	<i>Consultation d'un dossier interprété et compte-rendu</i>	7
2.3.4	<i>Fermeture de l'application</i>	7

1 CONNEXION A LA PLATEFORME DE TELEMEDECINE

Pour se connecter à la plateforme de télémédecine :



- Double-cliquer sur l'icône
- Patienter pendant le l'ouverture de l'application, jusqu'à l'affichage de la fenêtre d'identification
- S'authentifier

1.1 Authentification par carte de professionnel



- 1 - Insérer la carte CPS dans le lecteur
- 2 - Saisir le code porteur
- 3 - Renseigner le nom de l'espace de collaboration « **teleeeg** »
- 4 - Cliquer sur **Démarrer**

1.2 Authentification par Login/Mot de passe



- 1 – Saisir l'identifiant et le mot de passe dans les champs correspondants
- 2 - Renseigner le nom de l'espace de collaboration « **teleeeg** »
- 3 - Cliquer sur **Démarrer**

2 CREATION ET ALIMENTATION D'UN TELEDOSSIER

2.1 Menu principal de la plateforme de télémédecine Therap-e



Une fois connecté à l'application, accès aux fonctionnalités suivantes :

- Onglet **Dossiers** : permet de voir la liste des dossiers que vous avez créé ou ceux dont vous êtes le destinataire. Cet onglet permet également la création d'un nouveau dossier.

- Onglet **Salles**: permet de voir toutes les salles de téléconsultation et de rentrer en visioconférence avec un site distant.
- Onglet **Dicom** : permet d'ouvrir le gestionnaire Dicom, utilisé pour la création d'un télé dossier à partir de l'imagerie du patient (PACS, CD...) ou l'ajout d'imagerie à un télé dossier déjà crée au préalable.

2.2 Création d'un télé dossier

Cliquer sur les onglets




La fenêtre de création du dossier s'ouvre.

- Renseigner à minima **tous les champs en rouge** :
 - Nom de naissance ou non usuel
 - Prénom,
 - Sexe
 - Date de naissance
 - Consentement patient
- Le type de demande

Et Cliquer sur « suivant »

- **Choix des destinataires** : les médecins requis du CHU sont sélectionnés par défaut.
Sélectionner d'autres destinataires si vous le souhaitez et cliquer sur **valider**.

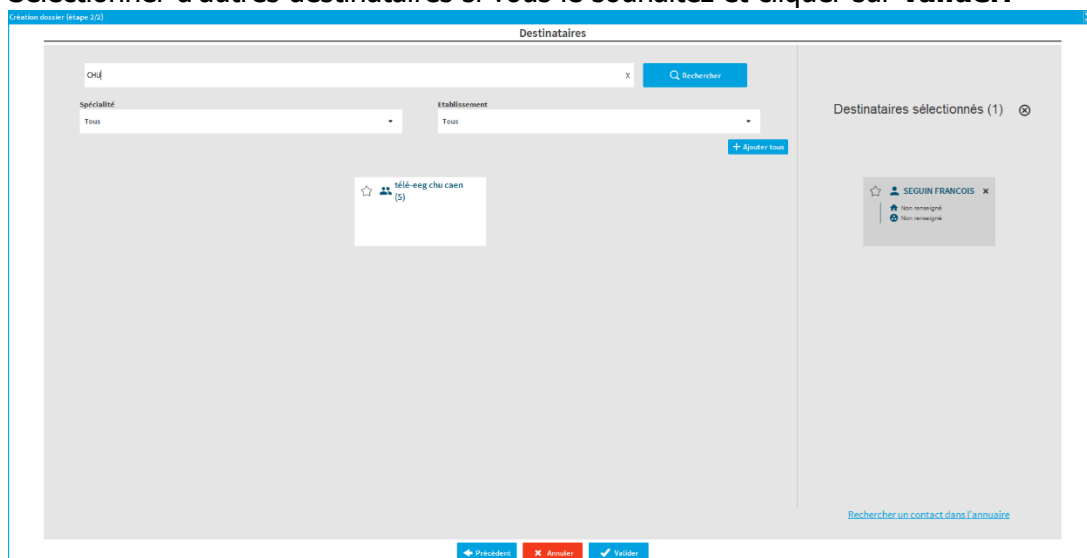

2.3 Alimentation du télédossier

Une fois le dossier créé, la fiche de liaison EEG s'ouvre automatiquement. La renseigner avec toutes les informations dont vous disposez.

Fiche de liaison EEG

Demande d'avis par télé-médecine

Date de la demande : 20/02/2017 11:08

Etablissement demandeur :

Type de demande : Interprétation d'EEG
 Téléguidage en Urgence

Patient : Adulte ou enfant
 Néonatalogie

Origine : Externe
 Hospitalisé

Nom de la personne jointe aux EFN :

Fonction de la personne jointe aux EFN :

Centre Demandeur

Médecin sénior :

Nom : Prénom :

⚠ Le nom du médecin sénior est obligatoire ⚠
Merci de renseigner le nom du médecin sénior

2.3.1 Ajout du tracé d'EEG au dossier


Dans la partie « Documents transférés en télé-médecine » de la fiche de liaison, cocher la case **EEG**, puis cliquer sur le bouton Ajouter un tracé EEG

Documents transférés en télémedecine

EEG Imagerie Explorations neurologiques

Signature du requérant :

L'explorateur de fichiers Windows s'ouvre. Sélectionner le dossier à ajouter puis cliquer sur le bouton Ajouter

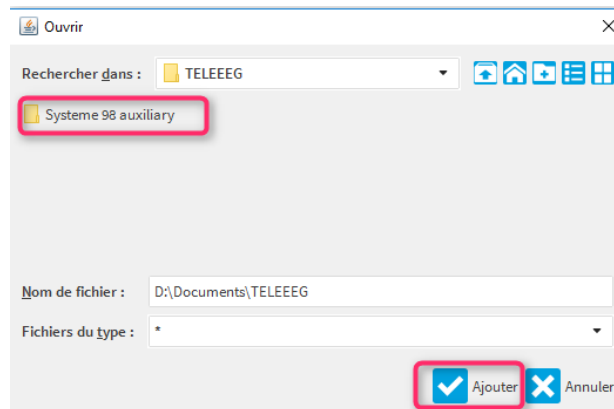

- Le dossier contenant l'EEG du patient s'ajoute au télédossier.

2.3.2 Fin de la saisie

Compléter la fiche jusqu'à la partie suivante :

Signature du requérant :

Fin de la saisie – Attente de l'avis du centre requis

A la fin de la saisie, cliquer sur le bouton pour valider les informations renseignées au-dessus. Les données saisies dans la fiche de liaison ne seront alors plus modifiables.

Pour fermer le dossier, cliquer sur en bas à gauche de l'écran. Le télédossier est automatiquement envoyé au centre expert.






L'état du dossier passe alors à « En attente d'interprétation » :

ARIMBAT AMYR 13/03/1986		20/02/2017 11:08	HENRI DUPONT-TEST	-	 Demande clôturée CR urgent	A téléch...
TEST1 EEG 04/05/1985		20/02/2017 09:43	FRANCOIS SEGUIN	-	 En attente d'interprétation	Envoy
TEST2 EEG 04/05/1964		20/02/2017 09:44	FRANCOIS SEGUIN	-	 Demande clôturée	Envoy
TEST3 EEG 20/02/1954		20/02/2017 09:45	FRANCOIS SEGUIN	-	 Nouveau dossier	Envoy

2.3.3 Consultation d'un dossier interprété et compte-rendu


- Ouverture du télédossier

Une fois le tracé interprété par le centre expert, son statut passe à « Demande clôturée ».

ARIMBAT AMYR 13/03/1986		20/02/2017 11:08	HENRI DUPONT-TEST	-	 Demande clôturée CR urgent	A télécha
TEST1 EEG 04/05/1985		20/02/2017 09:43	FRANCOIS SEGUIN	-	 En attente d'interprétation	Envoy
TEST2 EEG 04/05/1964		20/02/2017 09:44	FRANCOIS SEGUIN	-	 Demande clôturée	Envoy
TEST3 EEG 20/02/1954		20/02/2017 09:45	FRANCOIS SEGUIN	-	 Nouveau dossier	Envoy


Pour consulter un dossier interprété, il suffit de double-cliquer sur la ligne du dossier concerné.

NB : Lorsqu'un dossier a été interprété et que le compte-rendu doit être transmis rapidement au médecin demandeur, son statut passe à « Demande clôturée CR urgent » :

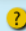
ARIMBAT AMYR 13/03/1986		20/02/2017 11:08	HENRI DUPONT-TEST	-	 Demande clôturée CR urgent	A télécha
TEST1 EEG 04/05/1985		20/02/2017 09:43	FRANCOIS SEGUIN	-	 En attente d'interprétation	Envoy
TEST2 EEG 04/05/1964		20/02/2017 09:44	FRANCOIS SEGUIN	-	 Demande clôturée	Envoy
TEST3 EEG 20/02/1954		20/02/2017 09:45	FRANCOIS SEGUIN	-	 Nouveau dossier	Envoy

- Consultation du compte-rendu

De la même manière que la fiche de liaison et le tracé EEG s'ajoutent dans le télédossier, les pièces jointes par le centre expert sont localisées dans le bandeau à gauche de l'écran. Pour les ouvrir, il suffit de double-cliquer dessus.

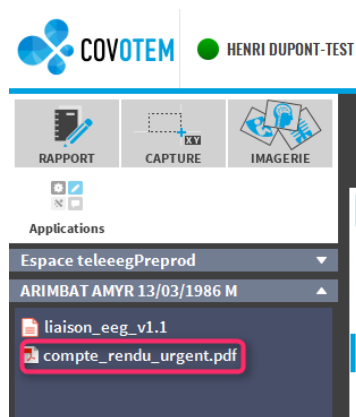

2.3.4 Fermeture de l'application

Lorsque vous avez terminé, fermer l'application en cliquant sur la croix  en haut à droite de l'écran, puis valider en sélectionnant

